Four point probe 操作說明

廠牌型號:JandelHM21(probe:type A 40u)

(適用範圍10m~10K ohm/□for TCO film, metal film, implant wafer,..)

規格:

1. 可顯示ohm/□或mv,亦可顯示量測之電流值


2. 6 段電流範圍切換,從100nA~10mA

3. 100 毆姆校驗電阻器可供驗機與校驗

4. 提供正向電流與逆向電流功能

5. 單位精度: 0.5% (100mV: 99.5 ~100.5mV)

6. 提供HI Resolution (0~150 mV)及Low Resolution (0~1250mV)模式

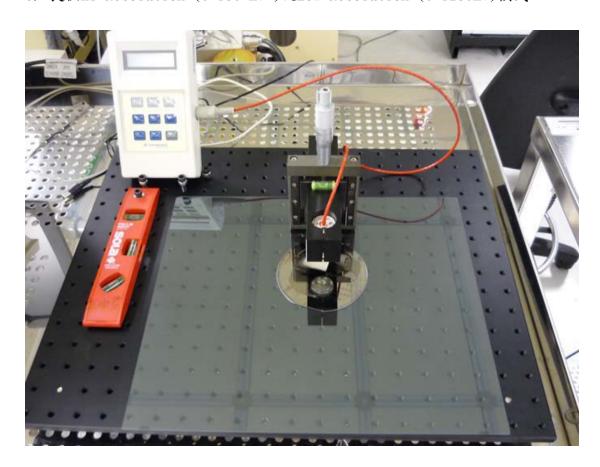

- 7. 螢幕出現Standby, 儀器開機完成
- 8. 測試片種類以不汙染探針為原則

材料需經工程師同意(如:CNT..)

如探針有異狀(歪斜或斷針..),請立即停止使用並告知工程師 保持量測平台整潔

9. 下探量測晶片,旋轉微調尺調降探針,點選START開始量測。